


Darmkrebsvorsorge

Patienten-Set für eine Laboranalyse

Dieses Set beinhaltet:

- 1 Stuhlprobenröhrchen mit Flüssigkeit gefüllt und mit Namensetikett beklebt
- 1 gelber Dosierstab
- 1 Stuhlfänger
- 1 Anleitung zur Probennahme

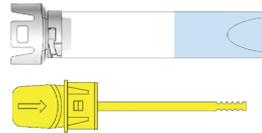

! Bitte beachten Sie vor der Probennahme:

- Frauen sollten den Test nicht zum Zeitpunkt ihrer Regelblutung durchführen.
- Der Stuhl und der Dosierstab dürfen nicht mit Wasser, Reinigungsmitteln oder Urin in der Toilette in Berührung kommen. Dies würde das Testergebnis negativ beeinflussen.

Eine detaillierte Anleitung zur Probennahme im Rahmen der Darmkrebsvorsorge entnehmen Sie bitte der Rückseite ▶▶▶


ANLEITUNG ZUR PROBENNAHME

IN DER PRAXIS

1.

Vorbereitung

Namensetikett mit **Patientennamen** und **Geburtsdatum** beschriften oder das Etikett der Online-Laboranforderung senkrecht auf das Stuhlprobenröhrchen kleben.

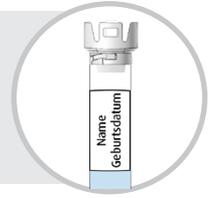

FÜR DEN PATIENT

2.

Gewinnung der Stuhlprobe


Nutzen Sie für die Gewinnung der Stuhlprobe den beigelegten Stuhlfänger. Folgen Sie bitte den dort aufgedruckten Anweisungen.

3.

Die Probennahme

Stuhlprobe aufnehmen:


Den gelben Dosierstab mind. 3-mal **an verschiedenen Stellen** der Stuhlprobe einstechen. **Alle** Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei mit der Stuhlprobe füllen.

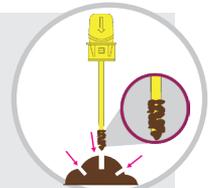

Dosierstab ins Stuhlprobenröhrchen stecken:

Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe **nur 1 Mal** in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen!**

Es darf nur diese kleine Stuhlmenge am Dosierstab in das Röhrcheninnere gelangen. Damit ist die Probennahme abgeschlossen.

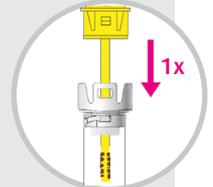


Stuhlprobenröhrchen verschließen:

Drücken Sie vorsichtig das Röhrchen so zu, dass der gelbe Verschluss **hörbar einrastet**. **Dieser Vorgang ist nur einmal möglich!** (Evtl. muss der Dosierstab etwas gedreht werden, bis die Erhöhungen des Dosierstabs in die passenden Aussparungen des Verschlusses einrasten.)



- ▶ Sie haben die Probennahme korrekt durchgeführt, wenn die Stuhllösung im Stuhlprobenröhrchen nahezu farblos ist.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das bereits verschlossene Stuhlprobenröhrchen nochmals zu öffnen.

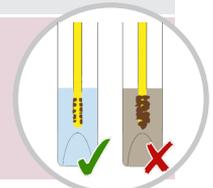

4.

Rückgabe in der Praxis

Stecken Sie das verschlossene und beschriftete Stuhlprobenröhrchen zurück in die Tüte. Bitte geben Sie Ihre Stuhlprobe so rasch wie möglich in der Praxis ab und lagern Sie diese bis zur Abgabe an einem kühlen Ort (Kühlschrank).